



Medical CE



ISO 13485

Tulium[®] Erbium⁺

1927 nm + 1550 nm

Złoty standard wśród
nieablacyjnych laserów
frakcyjnych.



Tulium + erbium 1927 nm + 1550 nm

Tulium + erbium jest frakcyjnym laserem o dwóch długościach fali: 1550 nm i 1927 nm. Oddziałuje zarówno na głębokie, jak i powierzchowne problemy skóry, zapewniając dwutorowe podejście, a tym samym kompleksowo działając na problemy skóry na różnych poziomach.

Połączenie laserów 1550 nm i 1927 nm może poprawić ogólną teksturę skóry i jej koloryt.

Laser 1550 nm jest odpowiedni do głębokiej rekonstrukcji skóry, ukierunkowanej przede wszystkim na głęboko położone problemy skóry, takie jak drobne linie i pory, oraz na poprawę tekstury skóry. Może być stosowany w przypadku pigmentacji skóry i oznak starzenia, takich jak plamy starcze, plamy słoneczne i melasma, a także zmarszczki wokół oczu, blizny potrądzikowe i blizny chirurgiczne.

Laser 1927 nm jest odpowiedni do powierzchownej rekonstrukcji skóry, ukierunkowanej przede wszystkim na powierzchowne problemy skóry, takie jak matowa skóra i zmiany hiperpigmentacyjne, w celu poprawy kolorytu skóry.





Tulium[®] Erbium⁺

Wszystkie odcienie skóry. Wszystkie części ciała.



Tryb frakcyjny



Tryb nieinwazyjny



Tryb przesuwania



Tryb ginekologiczny

Tryb nieinwazyjny

Umożliwia głęboką penetrację efektów termicznych lasera, jednocześnie utrzymując naskórek w bezpiecznym i komfortowym stanie. Jest stosowany w różnych zabiegach estetycznych, w tym w liftingu twarzy i liftingu brwi.

Tryb przesuwania

Wykorzystuje niższą gęstość energii i wyższą częstotliwość powtarzania, dzięki czemu energia jest równomiernie uwalniana i kumulowana oraz bezpiecznie i równomiernie rozprowadzana na każdym obszarze zabiegowym.

Tryb frakcyjny



Umożliwia dostosowanie parametrów, takich jak energia, szerokość impulsu i wzór, zgodnie z potrzebami zabiegu, aby osiągnąć wielowymiarowe działanie zarówno na powierzchniowy naskórek, jak i głębokie warstwy skóry właściwej.

Tryb ginekologiczny

Wspomaga tworzenie kolagenu i regenerację tkanek, poprawia zdrowie intymne kobiet i podnosi jakość życia.

Więcej zastosowań

1. Poprawa zmarszczek: linie wynikające z suchości, drobne linie, rozstępy, wiotkość skóry.
2. Stymulacja regeneracji kolagenu i opóźnienie starzenia.
3. Rozjaśnienie skóry, nierównomiernego kolorytu skóry.
4. Usuwanie blizn: blizn potrądzikowych i blizn chirurgicznych itp.
5. Usuwanie zmian pigmentacyjnych: piegów, ostudy, melasmy, blizn ospowych, plam starczych, plam słonecznych itp.
6. Poprawa rozszerzonych porów i szorstkiej skóry.
7. Zwiększenie wchłaniania produktów do pielęgnacji skóry.
8. Poprawa w przypadku łysienia łojotokowego itp.
9. Zabiegi wewnętrzne, obkurczanie pochwy, nietrzymanie moczu.
10. Poprawa tekstury i kolorytu sromu, zaróżowienie warg sromowych większych i mniejszych.

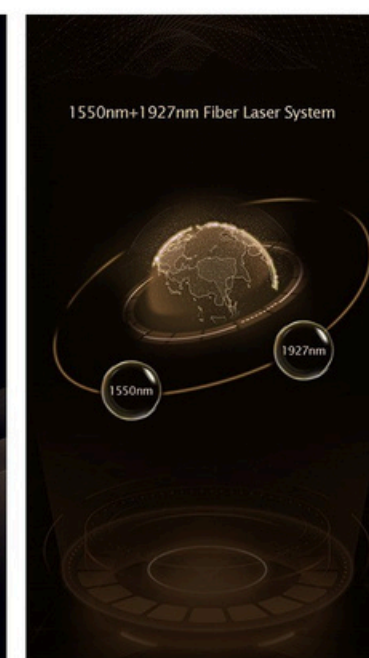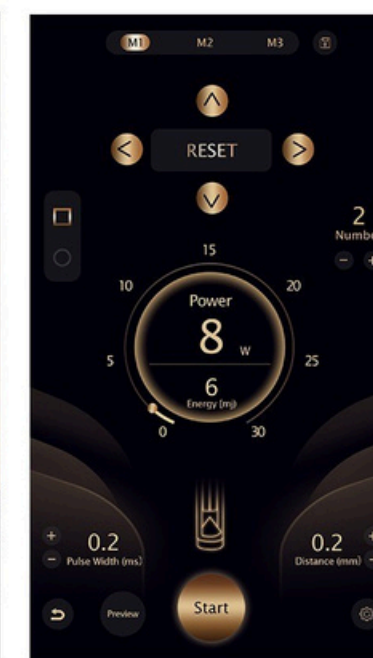



Medical CE



ISO 13485

Tulium[®] Erbium⁺


WSZYSTKIE ODCIENIE SKÓRY
WSZYSTKIE CZĘŚCI CIAŁA



Główne problemy skórne


1

Drobne linie
i zmarszczki

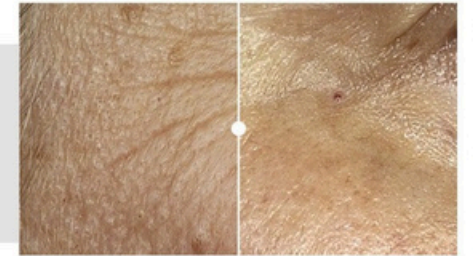

2

Piegi i plamy
słoneczne

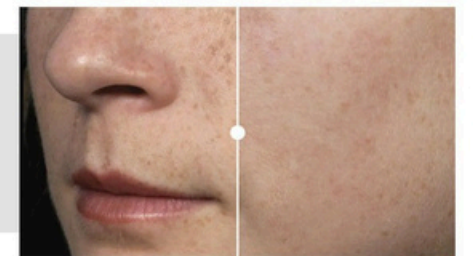


3

Rogowacenie słoneczne
(przedrakowe zmiany
skórne)



4

Plamy starcze

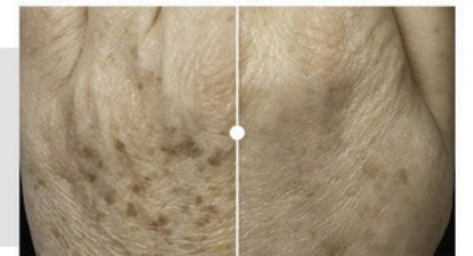


5

Blizny potrądzikowe
i chirurgiczne



Tulium[®] Erbium⁺

DOPASOWANY DO TWOICH
POTRZEB

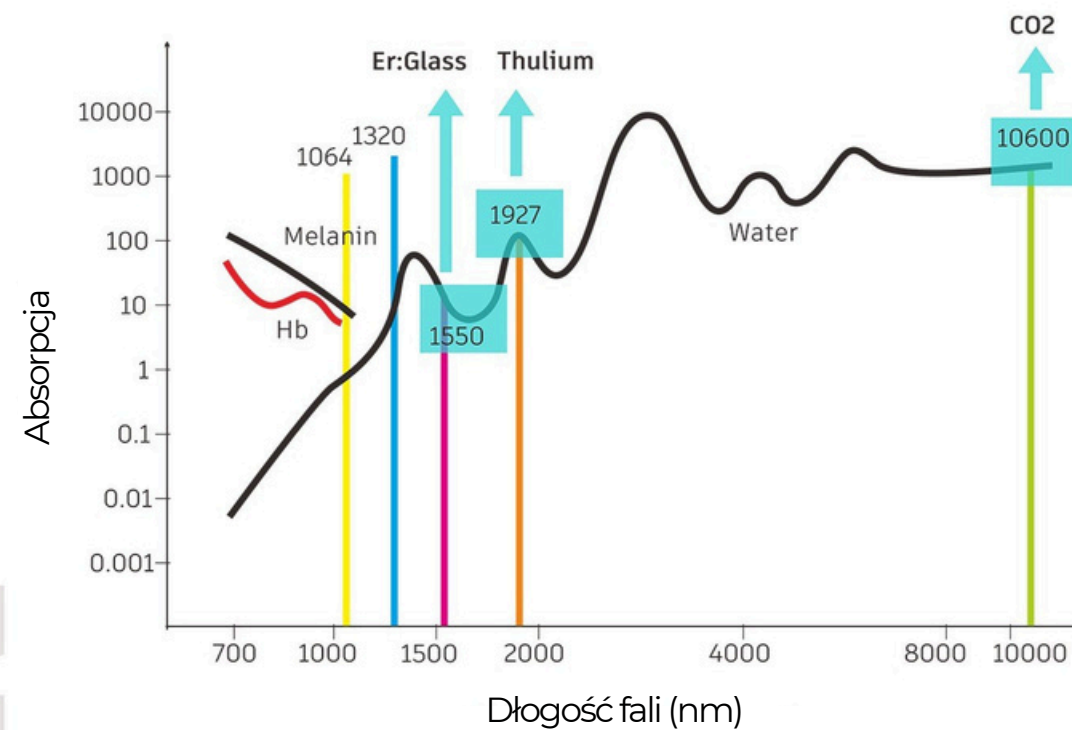

- Podwójny efekt ablacyjny i nieablacyjny, większe bezpieczeństwo i krótszy czas rekonwalescencji.
- Mniejsza absorpcja przez wodę i głębsza penetracja.
- Niski koszt konserwacji dzięki niewymagającemu wymianowi materiałowi eksploatacyjnemu oraz długiej żywotności włókna tulowego.





EKEFTY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PARAMETRY				
Długość fali	1927 nm + 1550 nm			
Moc lasera	30 W			
Napięcie	AC 220 V / 50 Hz; AC 110 V/ 60 Hz			
Tryb	Frakcyjny	Przesuwania	Nieinwazyjny	Ginekologiczny
Szerokość impulsu	0.1-10 ms	0.1-10 ms	1-100 ms	0.1-10 ms
Odległość	0.1-2.0 mm	0.1-2.0 mm		0.1-1.0 mm
Energia	0.1-300 mj	0.1-300 mj	30-3000 mj	0.1-300 mj
Grafika	Trójkąt, koło, prostokąt, romb, niestandardowy			
Rozmiar grafiki	1,0 × 1,0-20 mm × 20 mm; 3,0 × 3,00-12,0 mm × 12,0 mm			